




THD ANOSCOPIO DIAGNOSTICO MONOUSO STERILE

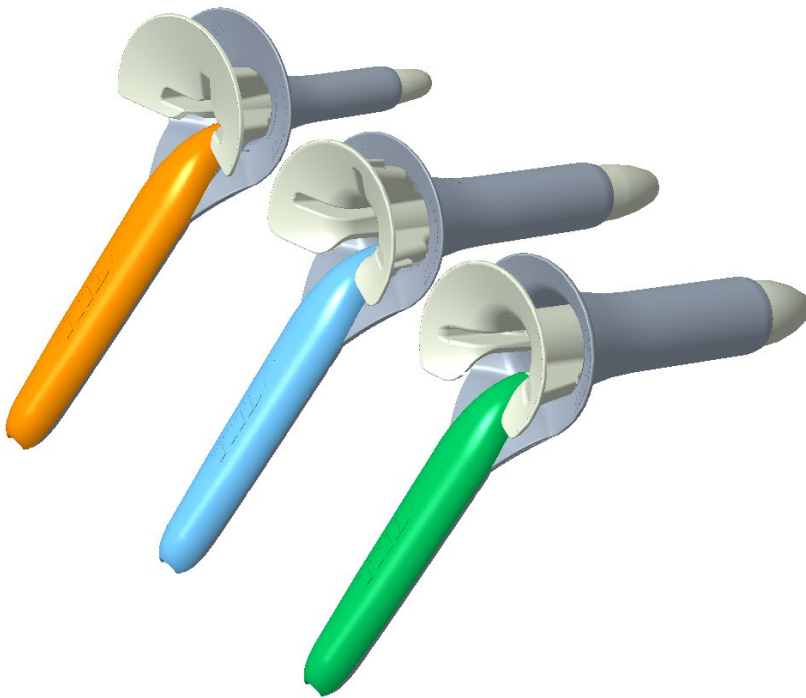

Utilizzo

La linea di anoscopi diagnostici sterili THD Diagnostic Line si compone di una ampia serie di dispositivi, disponibili in diversi diametri e con diverse aperture, per soddisfare le diverse esigenze cliniche e patologiche delle pratiche di anoscopia in ambito ambulatoriale e operatorio.

Descrizione Generale

L'anoscopio è realizzato in materiale termoplastico medico, trasparente ed antiurto.


L'anoscopio può essere utilizzato l'illuminatore THD LED2000 e THD REVOLUTION (funzione illuminatore) o con illuminatore da sala. Grazie

all'apposito puntale sagomato a fibre ottiche, disponibile come accessorio, permette un'efficace illuminazione dell'area di intervento, poiché la luce è indirizzata direttamente verso l'estremità.

Ogni anoscopio, completo del proprio introduttore, è confezionato singolarmente in doppia busta sterile.

Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medico
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Profilo inserimento atraumatico
- Pronto all'uso
- Dispositivo CE di Classe Is
- Confezionato singolarmente in buste di polietilene nel pratico imballo "Gravity Feed" box
- Latex Free
- Gamma completa di diametri, lunghezze e imboccature
- Diametro velocemente identificabile attraverso colorazione del manico
- Compatibile con illuminatore THD LED2000 e THD REVOLUTION
- Sterile
- Adattabile ad altre fonti luminose

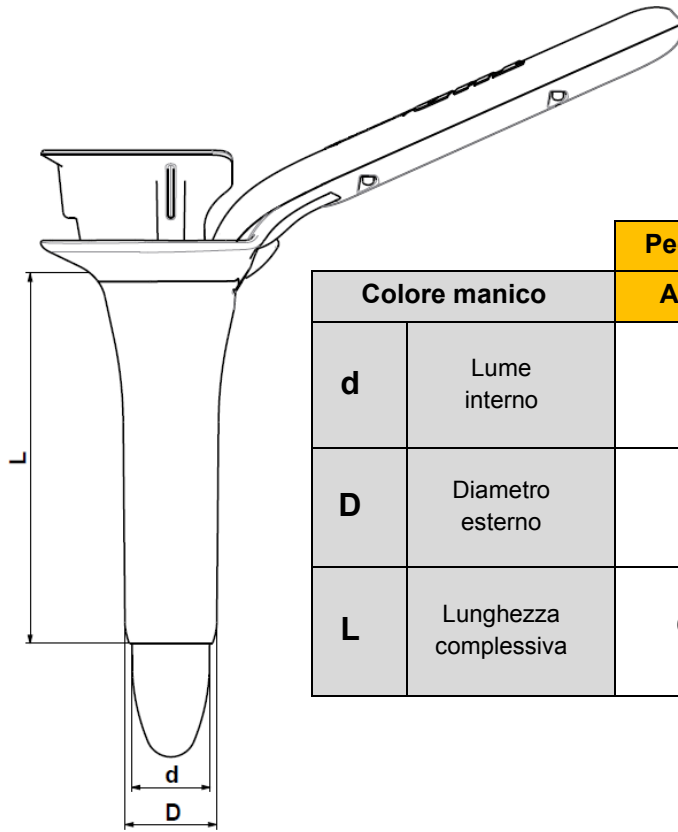

		Pediatrico	Medio	Grande
Colore manico		Arancio	Blu	Verde
d	Lume interno	12 mm	19 mm	23 mm
D	Diametro esterno	15 mm	22 mm	26 mm
L	Lunghezza complessiva	65 mm	90 mm	90 mm

THD Anoscopio diagnostico monouso STERILE				
TRONCO		FLAUTO		
Cod.	Q.tà	Denominazione	N° RDM	CND
800011 - 90	90	Anoscopio Pediatrico Tronco Sterile	16962	G02060301
800012 - 90	90	Anoscopio Pediatrico Flauto Sterile	507090	G02060301
800014 - 45	45	Anoscopio Medio Tronco Sterile	507092	G02060301
800015 - 45	45	Anoscopio Medio Flauto Sterile	507093	G02060301
800017 - 45	45	Anoscopio Grande Tronco Sterile	507095	G02060301
800018 - 45	45	Anoscopio Grande Flauto Sterile	507096	G02060301

THD360049_IT_Rev00_20180503_THD_Diagnostic Ano Sterili.docx