


# THD BANDY

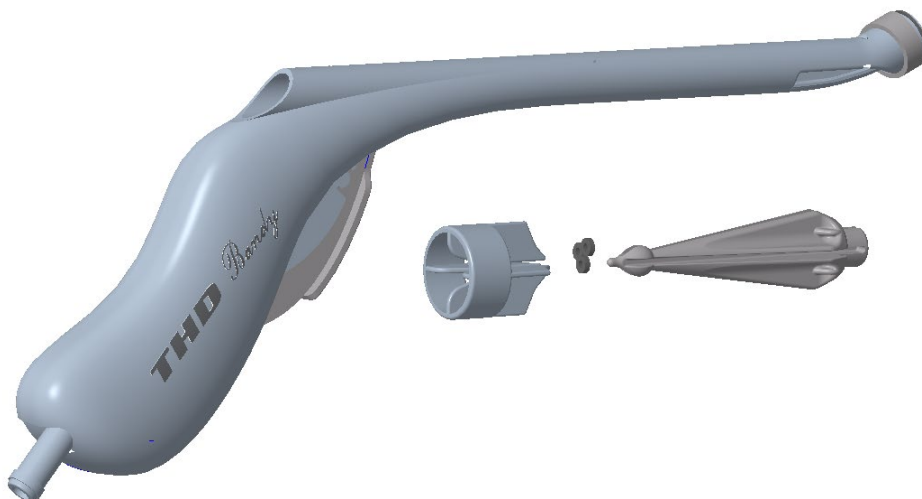

## Utilizzo

THD Bandy è un dispositivo medico monouso per il trattamento della patologia emorroidaria di 2° grado.

## Descrizione Generale

THD Bandy è un kit composto da un legatore elastico a suzione, 4 anelli elastici ed un sistema per il caricamento degli elastici il tutto pronto all'uso.

THD Bandy si collega ad un sistema di aspirazione e consente di controllare la quantità di tessuto aspirato attraverso un'apertura che permette l'aspirazione o il rilascio della mucosa.


Il particolare design del manico consente l'utilizzo con una sola mano nonchè un veloce e sicuro rilascio dell'elastico.

## Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Fornito con 4 anelli monouso
- Sistema di caricamento rapido degli anelli
- Pronto all'uso
- Leggero e maneggevole
- Dispositivo CE di classe IIa
- Confezionato singolarmente
- Latex Free

Vantaggi

- Utilizzabile con una mano
- Caricamento facilitato dell'elastico

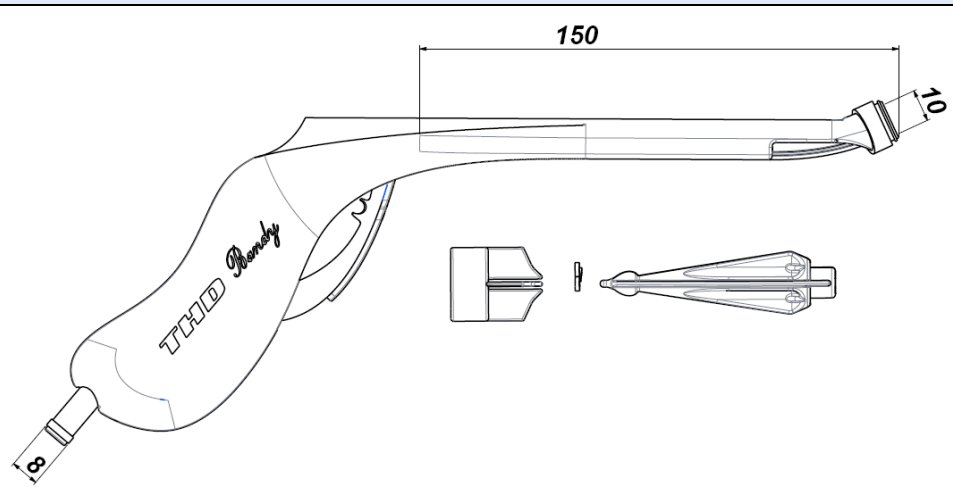Caratteristiche dimensionali	
	
Lunghezza esclusa impugnatura	150 mm
Diametro interno imboccatura	10 mm
Diametro collegamento aspiratore	8 mm

THD Bandy					
REF	Q.tà	Descrizione	Classe di rischio	N° RDM	CND
800079-10	10	THD Bandy	IIA	225347	G020401
<i>include</i>	/	10	Legatore monouso		
<i>include</i>	/	10	Cono di caricamento		
<i>include</i>	/	10	Spintore per caricamento anelli		
<i>include</i>	/	10	Elastici per legatura		