



THD SURGY HEMO KIT

THD SUTURE	THD SURGY MAXI STERILE	THD PORTAGHI
		

Utilizzo

Il THD Surgi Hemo Kit è il kit ideale per la realizzazione della mucopessia a riduzione del semplice prolasso emorroidario.

Descrizione Generale

Il kit si compone dell'anoscopio chirurgico THD Surgi, autoilluminante, che consente l'ottimale preparazione del tessuto al fine di ricevere i punti di sutura e realizzazione dell'anopessia.

La forma brevettata del divaricatore permette al chirurgo la comoda penetrazione e rotazione del device per la realizzazione delle diverse legature all'interno del canale anale.

La confezione comprende il necessario per eseguire 10 procedure di mucopessia, ovvero 10 anoscopi chirurgici, un portaghi dedicato e 20 confezioni di suture chirurgiche riassorbibili (12 suture per intervento).


Caratteristiche

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Autoilluminante con luce integrata nel dispositivo
- Profilo inserimento atraumatico
- Estremamente compatto
- Pronto all'uso
- Leggero (40 g)
- Sterilizzato ad Ossido di Etilene
- Dispositivo CE di Classe Is
- Confezionato singolarmente
- Latex Free
- Suture comprese
- Portaghi pluriuso



**Vantaggi:**

- dispositivo sterile
- non richiede una fonte luminosa aggiuntiva
- non richiede una preparazione prima dell'uso
- elimina il rischio di contaminazione incrociata
- ingombro ridotto, facilità di manovra
- mini-invasivo, atraumatico

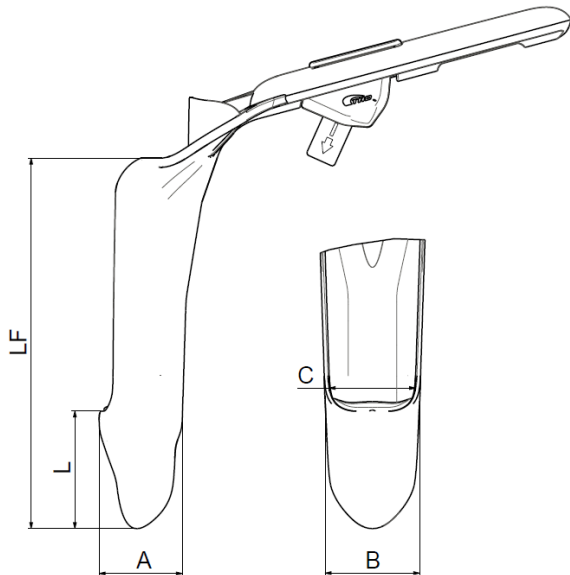

		Surgy Maxi
C	Lume interno	28 mm
B	Larghezza laterale	31 mm
A	Larghezza trasversale	27 mm
LF	Lunghezza dispositivo	122 mm
Cx(LF-L)	Finestra operatoria	28x85 mm



Al termine dell'utilizzo smaltire gli anoscopi THD N-ano come rifiuto ospedaliero secondo le leggi vigenti.



Nel caso l'anoscopio debba essere smaltito prima dell'utilizzo (ad esempio perché danneggiato) non smaltire nei rifiuti generici. Contiene componenti elettrici.

THD Surgy Hemo Kit						
REF	Q.tà	Denominazione	Classe di rischio	N° RDM	CND	
800184-10	10	THD Surgy Hemo Kit		118852		
<i>include</i>	800125	10	THD Surgy Maxi LightScope sterile	Is	1402971	G02060301
<i>Include</i>	880000	20	Confezione di n. 6 suture	III	51233	H010101020101
<i>include</i>	750001	1	THD Portaghi Pluriuso	I	1428997	L031399