

THD DERM A942 HIGH FREQ.



Utilizzo

L'unità Derm 942 High Frequency Desiccator è perfetta per il trattamento della displasia anale e altre procedure in anoscopia ad alta risoluzione (HRA).

Descrizione Generale

Il Derm 942 High Frequency Desiccator è una unità per elettro-chirurgia a bassa potenza, progettata per utilizzo in ufficio e che richiede scarsa manutenzione.

La potenza può essere impostata fino a 40 watts attraverso un incremento di 1/10 di watt per i primi 10 watts della scala, permettendo un'ampia varietà di utilizzo.

Il manipolo sterilizzabile in autoclave che riporta i pulsanti per la regolazione della potenza (800211) u il supporto in acciaio inox per il fissaggio sul carrello sono inclusi.

Dati Tecnici	
Altezza	18.8 cm
Larghezza	22.8 cm
Profondità	10.5 cm
Peso	< 2.6 kgs
Alimentazione	100-240 VAC
Frequenza di linea	50-60 Hz
Frequenza di uscita	328-429 kHz



THD SMOKE EVACUATOR SE02-220: ACCESSORI

THD A902 REUSABLE HANDPIECE

REF 800211



Il Reusable Hand piece è un manipolo pluriuso sterilizzabile in autoclave utilizzabile con Derm 942 High Frequency Desiccator. Il Reusable Hand piece riporta 3 pulsantii: usare il pulsante blu per attivare l'uscita monopolare, usare i bottoni su-giù per agire sulla regolazione della potenza fornita da Derm 942 High Frequency Desiccator. Il manipolo è sterilizzabile in autoclave a vapore.

THD 13-5300 REUSABLE GRINDING

REF 800209



Il Derm 942 High Frequency Desiccator può essere usato con o senza un cavo di terra ed un pad. Per evitare shock accidentali al personale o al paziente, il Reusable Grounding Cable può essere connesso alla Patient Plate del Derm 942 High Frequency Desiccator e usato in concomitanza con i Disposable Grounding Pads (800210). Questo dispositivo è testato per 100 utilizzi e viene venduto separatamente.

THD GBS-DB1031A DISP. GROUND.

REF 800210




Il Disposable Grounding Pad è predisposto all'uso con il Reusable Grounding Cable (800209) per la messa a terra elettrica del paziente senza contatto fisico con il personale. Questo pad genera la dispersione dell'energia proveniente dal Derm 942 High Frequency Desiccator facendola tornare alla macchina eliminando ogni rischio di shock doloroso al paziente o al personale. Il dispositivo viene venduto separatamente.



THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. REF 800212



Per la simultanea aspirazione dei fumi durante l'utilizzo di Derm 942 High Frequency Desiccator, si connetta lo Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit alla punta del manipolo a 3 pulsanti Reusable Hand Piece (800211) e lo Smoke-Evac Fusion Probes. Si colleghi poi il connettore 9mm allo Smoke-Evacuator (800181), usando la porta corrispondente.

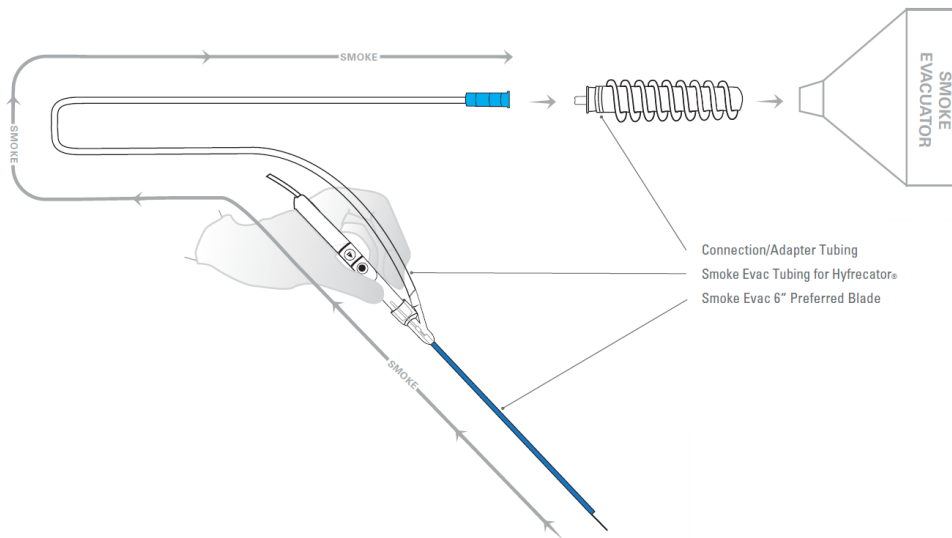

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220		
Q.tà	Codice	Descrizione
1	800231	THD DERM A942 HIGH FREQ.
1	800211	THD A902 REUSABLE HANDPIECE
1	800209	THD 13-5300 REUSABLE GRINDING
1	800210	THD GBS-DB1031A DISP. GROUND.
1	800212	THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS.