



# THD SURGY STERILE EINWEG



## Gebrauch

Das Anoskop THD SURGY ist ein medizinisches STERILE und EINWEG-Produkt, das für die Untersuchung und Chirurgie des Analkanals angezeigt ist.

## Allgemeine Beschreibung

Seine kompakte Bauweise ermöglicht einen einfachen Zugang zum After, somit eine gute Erweiterung und ein sanftes Zurückziehen der Mukosa, ohne dass der Schließmuskel verletzt wird. Der breite seitliche Schlitz ermöglicht eine optimale Visualisierung des Analkanals und verbessert das Operationsfeld.

Durch das asymmetrische Design wird der Analkanal lateral gestreckt und der Schleimhautvorfall vermieden.


THD Surgy wird aus hochwertigen transparenten Kunststoffmaterialien medizinischer Qualität hergestellt und ist für den Anschluss an einen Illuminator durch die speziell entwickelte faseroptische gebogene Spitze konzipiert.

## Eigenschaften

- Aus medizinischem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Kann mit der Kurvenfaseroptik verwendet werden
- Atraumatisches Einführprofil
- Extrem kompakt
- Gebrauchsbereit
- Leicht (40 g)
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I
- Einzeln verpackt
- Latex Free

Vorteile:

- benötigt keine Vorbereitung vor dem Gebrauch
- beseitigt die Gefahr von Kreuzkontamination
- reduzierter Platzbedarf, einfache Handhabung
- minimal invasiv, atraumatisch
- steril

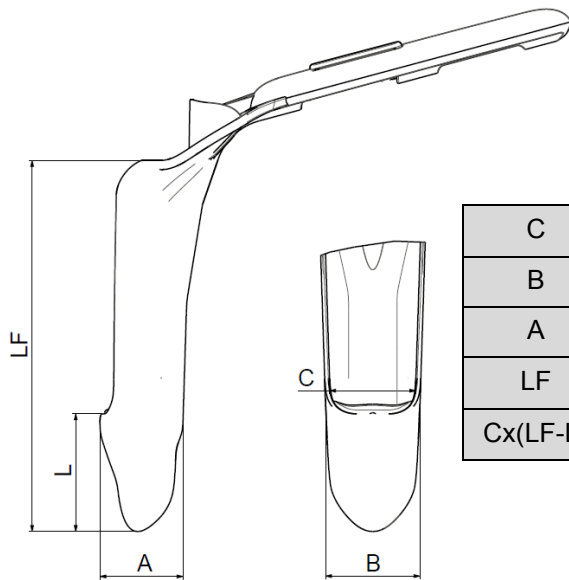

		Surgy mini	Surgy Maxi
C	Innenlumen	23 mm	28 mm
B	Breite	26 mm	31 mm
A	Breite	23 mm	27 mm
LF	Länge	122 mm	122 mm
Cx(LF-L)	Betriebsfenster	23x85 mm	28x85 mm



Nach dem Gebrauch das Light-Scope Rektoskop mit LED von THD als Krankenhausabfall entsprechend geltendem Gesetz entsorgen.



*Falls das mit LED ausgerüstete Light-Scope Rektoskop von THD vor dem Gebrauch entsorgt werden soll (z.B. wegen Ablauf des Verfalldatums oder bei Beschädigung), darf es dennoch nicht zum Hausmüll gegeben werden. Es enthält elektrische Teile.*

THD Surgy Sterile		
Code	Stk.	Bezeichnung
800004	10	THD Surgy Mini sterile
800005	10	THD Surgy Maxi sterile